



# TRIOMED“UNIVERSAL“

# DIE MILLIMETERWELLEN

Die Millimeterwellen sind kosmische Strahlung die in der Atmosphäre vom Wasserdampf aufgenommen werden und auf den menschliche Körper keine direkte Wirkung haben. Vor 60 Jahren wurde wissenschaftlich festgestellt das Zellen mit diesen Wellenlängen miteinander Kommunizieren. Die Millimeterwellen haben 1-10mm Länge oder eine Frequenz 30-300GHz. Sie dringen bis 0,6mm in die Hautoberfläche ein.

Es wurden Geräte entwickelt, die eine positive Wirkung ohne Nebenwirkungen auf die Menschen haben.

# DIE MILLIMETERWELLEN

Die Physiotherapiegeräte der Serie Triomed sind Millimeterwellengeräte der V Generation mit **BioTrEM**-Technologie. Mit ihrem SiGe (Silizium-germanium)-Halbleiter-generator (Chip Patent:EE 05541) sind sie sehr robust, komfortabel und Miniatur.

**BioTrEM**- ist eine biologisch gesteuerte Transduktion der elektromagnetische Wellen.

Sie haben 1-10mm – Wellenlänge oder 30-300GHz - Frequenz, eine Stärke -  $<10\mu\text{W}/\text{cm}^2$ .

Die Triomedgeräte habe drei Anwendungsformen:

- **EHF**-Extrem- Hohe- Frequenz
- **HRS**-Hintergrund- Resonanz- Strahlung
- **IR**-Infrarotfrequenz



# DIE MILLIMETERWELLEN


## Ausrichtung der BioTrEM-Technologie:

- **Die menschliche Persönlichkeit**, die verloren hat ihre eigene qualitative biologische und soziale Funktionen.
- **Prophylaktische Anwendungen**, die gezielte Körperreserve herstellen zur Unterstützung der Gesundheit bei Anforderungen für die konkreten Tätigkeiten und Umgebungsbedingungen.
- Besondere Aufmerksamkeit der Anwendungen liegt bei **der Selbstkorrektur** der Körperfunktionen zu Hause oder in den betrieblichen Umgebungen.

In der Konstruktion der Geräten wurde die Idee eines Biotechnischessystem realisiert, wo der Strahler der elektromagnetischen Wellen eine Verbindung zwischen biologischen System(Mensch) und technischen Gerät herstellt und eine **„Bioparametrische“–Strahler(Strahler mit einem biologisch empfindlichen Element)** ergibt.

Das Rückgrat der BioTrEM-Technologie ist **die ständige biologische Verbindung** auf verschiedenen Ebenen der reale Zeit- **ständige individuelle Nachregelung.**

# „Bioparametrische“-Strahler (Strahler mit einem biologisch empfindlichen Element).

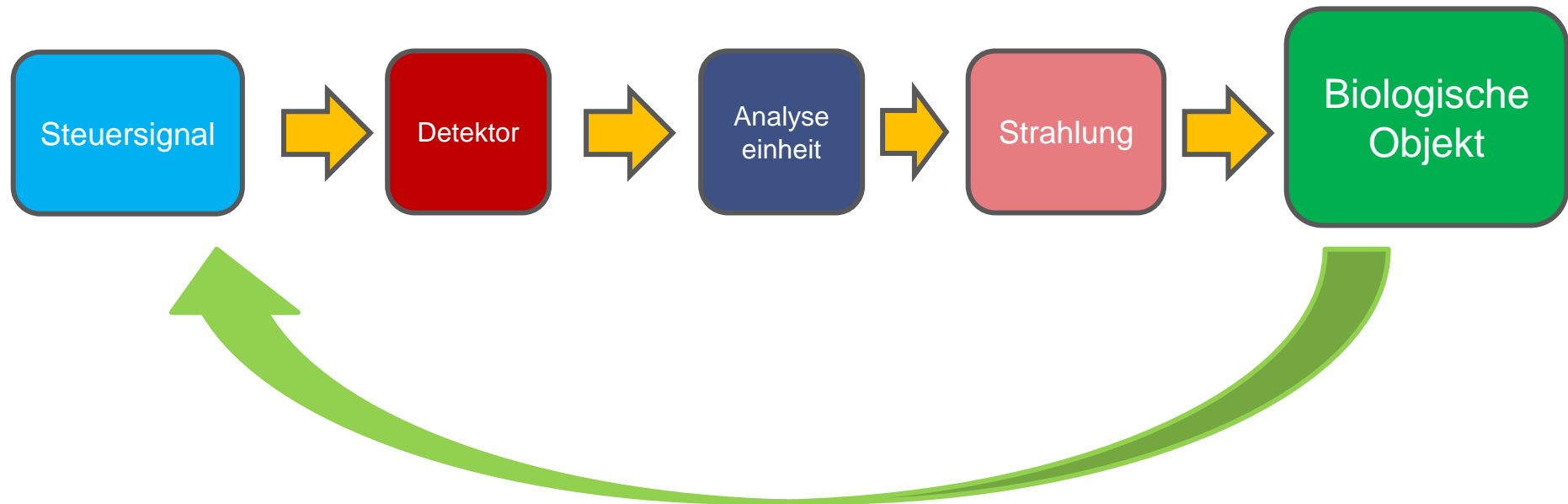

# Physiotherapiegeräte der Serie "TRIOMED"

Die Triomedgeräte haben **1-10mm** – Wellenlänge= **30-300GHz** – Frequenz und **Stärke:  $<10\mu\text{W}/\text{cm}^2$**

- **$1\mu\text{W}/\text{cm}^2$** - haben stabile therapeutische Effekte: stellt die Funktion der Zellmembranen und der Zellorganellen her; optimiert die Empfindlichkeit der extra- und intrazellulären Rezeptoren zur Mediatoren; optimiert das neuro-humorale Regulationsystem; harmonisiert das sympatho-parasympathische System; optimiert die Prostaglandinenfunktion sowie die Mastzellenfunktion: Serotonin und Histamin im Gewebe.
- **$1-10\mu\text{W}/\text{cm}^2$**  - gehen die Zellen in selbstschwingenden Modus, das heißt das jedes Gewebe hat eine Basisfunktion.
- **$>10\mu\text{W}/\text{cm}^2$** - charakterisiert sich mit einer chaotische Antwort der Systemen.

Heute werden keine mehr Geräte mit eine Stärke  $>10\mu\text{W}/\text{cm}^2$  hergestellt.

## Effekte:

- ❖ Anti-Stress-Wirkung
- ❖ antiphlogistische Wirkung
- ❖ Schmerzreduktion
- ❖ antiödematöse Wirkung
- ❖ Verbesserung der Prozesse der Geweberegeneration
- ❖ erhöhen die Widerstandskraft des Körpers gegen Krankheiten
- ❖ verbesserte Durchblutung
- ❖ Harmonisiert die Regulierung des autonomen Nervensystems
- ❖ Erhöht die Endorphinbildung
- ❖ Zusätzliche Produktion bioaktive Stoffe
- ❖ Immunmodulierende Wirkung
- ❖ Aggregationshemmende Wirkung
- ❖ Desintoxikationswirkung

# Besonderheit der „Triomed“-Technologie


- ❖ Systematische harmonisierende Wirkung
- ❖ Sehr hohe Effekte bei selbst und gegenseitige Hilfe(Notfälle)
- ❖ Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbelastungen sowie bei schlechten Arbeitsbedingungen
- ❖ Keine Gewöhnung bei der Anwendung(Abhängigkeit)
- ❖ Keine Erschöpfung bei längeren Anwendungen



## Was kennen wir mit den Geräten der „**Triomed**“-Technologie realisieren:

- Prophylaxe der Krankheiten(10-15 Tage ein Kurs)
- Vorbeugung der Exazerbation von Erkrankungen
- Unterdrückung der Symptomen einer Erkrankung
- Unterstützung der ärztlichen Behandlungen
- Bei selbst und gegenseitige Hilfe(Notfälle)

# Realisierung der Effekte mit der „BioTrEM“-Technologie :

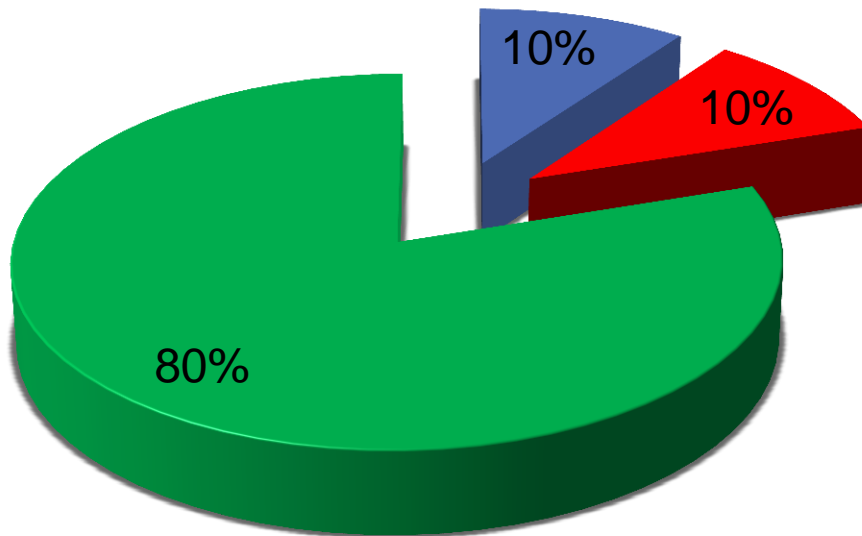

- Effekte abhängige von der Frequenz
- Effekte abhängige von der Zone
- garantierte Effekte



## Physiotherapiegeräte der Serie "TRIOMED"

Die Physiotherapiegeräte der Serie "TRIOMED" sind für die Mitbehandlung und Vorbeugung von verschiedenen pathologischen Zuständen durch Bestrahlung des Menschen mit elektromagnetischen Wellen in extrem hoher Frequenzen (EHF) und Infrarotwellen (IR) entwickelt worden.

### Vorteile der Geräte der-Serie "TRIOMED":

- Niederintensive Strahlung (Infrarot- und Millimetertwellen );
- Programmierbare Behandlungsschemata;
- Verfügen über individuelle Anpassung der therapeutischen Wirkungen;
- Tragbare Geräte; Einfache Anwendung für den Benutzer; hohe Zuverlässigkeit; lange Betriebszeit.
- Die Serie umfasst Geräte: "TRIOMED UNIVERSAL" mit austauschbaren Strahler, "TRIOMED COMPACT,, "TRIOMED Vital“, „Triomed CGI“ und Gesundheits- Anhänger.



# Physiotherapiegeräte der Serie "TRIOMED"

## EHF-Breitband und Wirkung

- 1- Rot-40-43 GHz( 7,5-6,977mm)-Blutsystem
- 2- Grün- 52-57 GHz (5,769-5,263mm)-Lymphsystem, Immunsystem
- 3- Blau-57-63GHz( 5,263-4,762mm)-Neuroendokrinesystem,
- 4- Breitband-Universal- Strahler -1-10mm -30 - 300 GHz-alle Zellen
- 5-Weiß- IF-Infrarot- 0,4-1,2mkm - drängt bis zu 5cm Körpertiefe ein

**In den letzten Jahren wurden neue bioaktiven Frequenz: 50,3 GHz (6,0 mm); 51,8 GHz (5,8 mm); 65,0 GHz (4,6 mm) identifiziert.**

# Physiotherapiegeräte der Serie "TRIOMED"

## Es gibt keine absolute Kontraindikationen der EHF-Anwendung

### Liste der relativen Kontraindikationen EHF:

- Unverträglichkeit der EHF
- bei unklaren Diagnosen
- Fieber unklare Genese

### Anwendungsdauer:

- **EHF**(Extrem Hohe Frequenz)-30min./Tag
- **HRS**(Hintergrund-Resonanz-Strahlung)- unbegrenzte Zeit
- **IR**(Infrarot)-5-10min./Zone

# DIE WIRKSAMKEIT DER EHF-ANWENDUNG BEI EINIGEN ERKRANKUNGEN(STUDIEN)

- **Magengeschwür und Zwölffingerdarmgeschwüren:** eine sofortige Wirkung und Epithelisierung der Geschwürnarbe in 96% der Patienten; Dauer der Remission für mehr als 5 Jahren - 75%; die Notwendigkeit für 2 oder mehr Behandlungszyklen - 10%.
- **Chronische Bronchitis, Asthma bronchiale:** Linderung der bronchiale Obstruktion in 87% der Patienten; Dauer der Remission für 2 Jahre oder mehr - 61%; die Notwendigkeit für 2 mehr Behandlungszyklen - 38%.
- **Komplikationen von Diabetes Typ I:** Stabilisierung des Diabetes - 96%; Stabilität des Behandlungseffekts in 1 Jahr - 25%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 93%.
- **Hypertensiven Herzerkrankung:** eine anhaltende Senkung des Blutdrucks mit dem Hintergrund der Reduzierung der Dosis von blutdrucksenkenden Medikamenten - 62%; eine Stabilisierung der Krankheit - 82%; die Stabilität des Behandlungseffekts in 1 Jahr oder mehr - 56%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 47%.
- **Koronarer Herzkrankheit, Angina FC I-II:** Verringerung der Häufigkeit der Herzschmerzen(Angina- Attacken) - 82%; Reduktion der Tagesdosis eingenommenen Nitraten - 94%; Stabilität des Behandlungseffekts in 1 Jahr oder mehr - 42%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 75%.

## DIE WIRKSAMKEIT DER EHF-ANWENDUNG BEI EINIGEN ERKRANKUNGEN(STUDIEN)

- **Lebererkrankung (Zirrhose, Fettleber, virale Hepatitis):** Normalisierung der biochemischen Funktionen der Leber - 82%; die Normalisierung der Organstruktur (nach den Strahldiagnostik) - 48%; Stabilität des Behandlungseffekts in 1 Jahr oder mehr - 53%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 87 %.
- **Entzündlichen Krankheiten der weiblichen Genitalien:** der stabile Behandlungseffekt in 1 Jahr oder mehr - 64%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 22%.
- **Entzündungserkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane:** der stabile Behandlungseffekt in 1 Jahr oder mehr - 68%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 32%.
- **Erkrankungen des Bewegungsapparates:** Rückgang der Schmerzen - 86% Rückgewinnung der Gelenkfunktion - 52%; Stabilität des Behandlungseffekts in 1 Jahr - 42%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 52%.
- **Allergien:** der stabile Behandlungseffekt in 1 Jahr - 52%; die Notwendigkeit der wiederholten Behandlungszyklen - 43%.

# TRIOMED „UNIVERSAL“



Das Triomed „Universal“-Gerät hat austauschbare Strahler, die bei verschiedenen Programmen angewandt werden.



## Strahler – „Universal“ „1Y“-

Serienmäßig mit dem Gerät "Triomed Universal".

**Modus 1** : Anwendung: bei allen Bestrahlungsprogrammen

Dauer: 10min pro Sitzung, pro Tag-30min. Wirkt auf die Hypothalamo-Hypophyse- Nebenniere-Achse, Herstellung des allgemeinen Stoffwechsels und hat eine allgemeine stärkende und harmonisierende Wirkung.



## Strahler-“HRS“ „2F“- Serienmäßig mit dem Gerät "Triomed Universal"

**Modus 2** : Hintergrund Resonanzstrahlung-Anwendung: bei allen

Bestrahlungsprogrammen Dauer: 15 min beim eingeschaltetem Gerät pro Sitzung, passiv-nicht eingeschaltet: Zeitlos, auch zwischen Anwendungsprogrammen. Übertragung der aufgenommenen Information auf andere Informationsträger(Wasser).



# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Infrarot-Strahler „IR“- Modus 5

**Dauer:** 5-10min pro Sitzung

### Anwendung:

- subakute und chronische eitrige Entzündungen der inneren Organe; (10min/Zone - 2 Wochen)
- schlecht heilende Wunden und Geschwüre; (5min-2Wochen)
- Erkrankungen des peripheren Nervensystems mit Schmerzen;
- Narben nach Operationen, Verbrennungen und Erfrierungen; (10min/Zone -2 Wochen)
- Störungen des autonomen Nervensystems;
- Diabetes mellitus Typ 2 um zu die Empfindlichkeit des Gewebe gegenüber Insulin steigern. (5min/Zone - 2 Wochen)

### Gegenanzeigen:

- bei gutartigen oder bösartigen Tumoren;
- aktiven Form der Tuberkulose;
- Hypertonie Stadium III;
- Blutungen;
- Kreislaufversagen Stadium II-III.
- **Nicht empfohlen Bestrahlung der Augen!**



# TRIOMED „UNIVERSAL“



**Infrarot-Strahler „IR“- Zonenbestrahlung-  
Dauer-5min und 2h vor einer Programmsitzung.**

Bei chronischen Krankheiten mit atrophischen und degenerativen Prozessen wird das folgende Programm empfohlen:

1Tag: Zone 55li+ Zone 35re;

2Tag : Zone 55re+ Zone 35li;

3. Tag: Zone 89+ Zone 88;

4Tag : Zone 89+ Zone 88;

5Tag: Zone 4 re + Zone 89;

6Tag: Zone 4li+ Zone 89.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Strahler-Antidiabetika

### Modus 7

**Dauer: 12min**

### Anwendung:

Bestrahlung biologisch aktiven Zonen und Punkten. Wird in integrierten Programmen für die Prävention und Mitbehandlung von Diabetes mellitus Typ I und II und deren Komplikationen eingesetzt.

- Trägt zur Optimierung aller Arten von Stoffwechseln (Kohlenhydrat, Lipid, Protein, Mineral).
- Verbessert den Stoffwechsel (Metabolismus) in den Zellen der Bauchspeicheldrüse.
- Optimiert die Produktion von Insulin durch die Zellen der Bauchspeicheldrüse.
- Erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Insulin.
- Verbessert den Zustand der Rezeptoren der Zelle, im Insulinabhängigen Geweben.
- Hilft Ödeme beseitigen.
- Beschleunigt die Regeneration und Reparatur von Zellen der Bauchspeicheldrüse.
- Hat entzündungshemmende Wirkung.
- Verbessert die Durchblutung.
- Prävention gegen die Entwicklung von Diabetes.
- Reduziert das Risiko von Komplikationen beim Diabetes.



# TRIOMED „UNIVERSAL“



**Special Strahler- für Frauen "Triowomen" (♀ )**

**Modus 8**

**Dauer: 10min**

**Anwendung:**

- Erhöht die Sensibilisierung der Regulierungszentren für die Produktion der weiblichen Geschlechtshormone;
- Erhöht die Gewebeempfindlichkeit gegenüber weiblichen Sexualhormone;
- Aktiviert das antioxidative System;
- Aktiviert das vegetative System
- Stärkende Wirkung auf den Körper;
- Verbesserung der allgemeinen Immunität.

# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Strahler-Arthrotrophe "Gesunde Gelenke,,

### Modus 9

**Dauer:** 12min

### Anwendung:

Wird in integrierten Programmen der Prävention, Behandlung und Rehabilitation, von Patienten mit Erkrankungen der Gelenke und der Wirbelsäule, eingesetzt.

- Verbesserung des Stoffwechsels in dem Geweben der Gelenke und der Wirbelsäule;
- Verbesserung der Durchblutung in den Geweben der Gelenke und der Wirbelsäule;
- analgetische Wirkung;
- Entzündungshemmende Wirkung;
- Anti-Ödem-Effekt;
- Beschleunigung der Vorgänge der Regeneration und der Reparatur von Gewebe;
- Verbesserung des muskulären System. Wird zusammen mit dem Anhänger „Osteosil“ verwendet-**ein doppelter Effekt**



# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Strahler- Antihypoxie "Oxygen" „1K“

**Modus: 11**

**Dauer: 10min**

### **Anwendung :**

Wird in integrierten Programmen der Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen mit gestörter Sauerstofftransport und Verbrauch verwendet.

- zur Vorbeugung und Mitbehandlung von Krankheiten, die durch Stress, Schlaganfall, Herzinfarkt und ihrer Folgen,
- chronische Müdigkeitssyndrom; beschleunigen die Prozesse der Regeneration in der Behandlung von langfristigen Heilung von Geschwüren, Wunden, einschließlich postchirurgischen Wunden, Verbrennungen, Knochenbrüche;
- Normalisierung der Immunität bei akuten und chronischen Erkrankungen;
- Verbesserung der Hirndurchblutung;
- für die Normalisierung des Blutes in der Erholung nach Chemo-und Strahlentherapie;
- Rehabilitation nach einer schweren Krankheit und körperliche Aktivität;
- Steigerung der Ausdauer und Konzentration in Form eines erhöhten physischen und psychischen Stress (während der Nacht);
- Steigerung der körperlichen Ausdauer und sportliche Leistungsfähigkeit;
- Steigerung der Effizienz und Verbesserung der funktionellen Status von Schülern und Studenten in der Ausbildung.
- Die Richtung der Effekte: Hämoglobin, Mitochondrien, Enzyme, die Beförderungen und
- Verwertung von Sauerstoff.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

**Strahler- Antihypoxie "Oxygen" „1K“**

**Modus: 11**

**Dauer: 10min**


**Anwendung :**

- für die Normalisierung des Blutes in der Erholung nach Chemo-und Strahlentherapie;
  - Rehabilitation nach einer schweren Krankheit und körperliche Aktivität;
  - Steigerung der Ausdauer und Konzentration in Form eines erhöhten physischen und psychischen Stress (während der Nacht);
  - Steigerung der körperlichen Ausdauer und sportliche Leistungsfähigkeit;
  - Steigerung der Effizienz und Verbesserung der funktionellen Status von Schülern und Studenten in der Ausbildung.
- Die Wirkungsrichtung sind: Hämoglobin, Mitochondrien, Enzyme, die Beförderungen und Verwertung von Sauerstoff.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Effekte:



Verbesserung der Mikrozirkulation,  
immunmodulatorische Effekte,  
entzündungshemmende Wirkung,  
Reduzierung der Gewebhypoxie durch erhöhen der Sauerstoff-  
sättigung im Gewebe,  
Disaggregationswirkung (entfernt Konglomerat von Erythrozyten  
und anderen Blutzellen),  
Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes,  
Beschleunigung der Wundheilung,  
Resorption von Narben,  
analgetische Wirkung,  
krampflösende Wirkung,  
Verbesserung der Blutfunktion,  
verjüngende Wirkung.





# Triomed „Universal“



## Strahler-Kardiotrope "Gesundes Herz"

**Modus: 12**

**Dauer: 12min**

### **Anwendung:**

Er wird in integrierten Programmen der Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-System verwendet.

Der Strahler "Gesundes Herz" kann bei ischämischen Herz-erkrankungen verwendet werden (einschließlich Angina pectoris), Post-Infarktzustand, Herzrhythmusstörungen, Hypertonie (jeder Herkunft), andere Krankheiten, die den Herzmuskels und Endokard beschädigt, erhöhte Cholesterin und Atherosklerose.

Die Wirkungsrichtung ist : Herzmuskelzellen, vaskuläre Gewebe des Herzens, die Zentren der autonomen Regulation des Herzens.

# TRIOMED „UNIVERSAL“



## Effekt:

- Verbessert Myokardkontraktilität;
- Optimierung den Funktionszustand des Leitungssystem des Herzens;
- Vorbeugung von Schlaganfällen;
- potenziert die Steigerung der Herzleistung;
- verbessert die Durchblutung des Herzgewebe nach dem Infarkt;
- verbessert die Mikrozirkulation;
- hilft bei koronarer Vasospasmus und reduziert ihn.

# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Strahler-Hepatotropie "Eine gesunde Leber,"

**Modus: 14**

**Dauer: 12min**

### **Anwendung:**

Er wird in integrierten Programmen der Prävention, Mitbehandlung und Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen der Leber, der Gallenblase und der Gallenwege genutzt.

- Verbesserung der Stoffwechselfvorgänge in den Leberzellen (Hepatozyten);
- Aktivierung der wichtigsten Funktionen der Leber;
- Anti-Ödem-Effekt;
- Beschleunigung der Regeneration und Reparatur von Hepatozyten;
- krampflösende Wirkung;
- milde analgetische Wirkung;
- entzündungshemmende Wirkung;
- Verbesserung der Blutzirkulation in der Leber;
- verbesserte Gallenproduktion und Transport.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Strahler-Renotrophe "Gesunde Nieren"

**Modus: 15**

**Dauer: 11min**

**Anwendung:**

Wird in integrierten Programmen der Prävention, Mitbehandlung und Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen der Nieren und Harnwege verwendet. Der Strahler "Gesunde Nieren" wird für die Prävention und Behandlung von akuten und chronischen entzündlichen Erkrankungen der Niere, Blase und Harnwegen, metabolische Prozesse (einschließlich Nierensteine), systemischer Autoimmunerkrankungen mit Nierenerkrankung, assoziierte und autoimmune Erkrankungen der Nieren, toxische Läsionen der Nieren verwendet.

# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Effekte:

- verbessert die Durchblutung und den Stoffwechsel in den strukturellen und funktionellen Einheiten der Niere (Nephron) und Harnorgane;
- Normalisierung der wichtigsten Funktionen der Nieren (sekretorische, in Blutbildung beteiligt, Osmo- und Ionen-regulierende, endokrine, metabolische);
- Intensivierung der Prozesse der Regeneration und Reparatur von Nierengewebe- und Harnwegsinfektionen;
- krampflösende Wirkung;
- analgetische Wirkung;
- entzündungshemmende Wirkung.

# TRIOMED „UNIVERSAL“

Special-Strahler für Männer "Trio-Man» (♂)

**Modus: 23**

**Dauer: 10min Anwendung:**

Wird in integrierten Programmen der Prävention, Mitbehandlung und Rehabilitation von Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane, reproduktive Störungen und sexuelle Gesundheit bei Männern, in Störungen der hormonellen Regulation verwendet.

**Effekte:**

- erhöhte Empfindlichkeit der Regelung des Zentrum der Produktion der männlichen Sexualhormone;
- Erhöhung der Gewebeempfindlichkeit auf Hormone der genitalen und zentralen endokrinen Organe;
- Aktivierung der antioxidativen Systeme;
- Vegetostabilisierende Wirkung;
- stärkende Wirkung auf den Körper;
- Verbesserung der allgemeinen Immunität.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

**Strahler- Anti-Entzündung "Green,,**

**Modus: 26**

**Dauer: 13min Anwendung:**

Wird in integrierten Programmen der Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen, die mit Entzündungen, Schwellungen und Staus der Lymphe (Lymphostase) verwendet. Kann bei Verletzung der Haut (Wunden, Abschürfungen), Trauma, Verbrennungen, Prellungen, Verstauchungen und allergische Reaktionen durch Schwellung und Entzündung verwendet werden. Bei entzündlichen Erkrankungen der Gelenke, Intoxikation (Vergiftung) jeglicher Herkunft (Alkohol, Drogen, Lebensmittel, Chemie, usw. ), bei der Behandlung von postoperativen Wunden und Frakturen mit kosmetischen Zwecken, die Entwässerung der Haut zu verbessern.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Effekte:

- entzündungshemmende;
- immunmodulatorische Effekte;
- Verbesserung der Lymphdrainage;
- Normalisierung der Hämostase Lymphozyten;
- Intensivierung der Beseitigung von Giftstoffen;
- Aktivierung der Regeneration und Reparatur von Gewebe;
- Anti-Ödem-Effekt;
- analgetische Wirkung;
- Aktivierung der Resorption Narben;
- Aktivierung der Funktion des Knochenmarks.





# TRIOMED „UNIVERSAL“



**Strahler-Regulator "Blue,,**

**Modus. 51**

**Dauer: 15min**

**Anwendung:**

Die EHF-IR Therapie "TRIOMED UNIVERSAL" mit dem Strahler „Regulator" kann für die Prävention und Behandlung von Störungen des autonomen Nervensystems verwendet werden.

Die Störungen des endokrinen und des Nervensystems, allergische Erkrankungen, Krampfadern, chronische Müdigkeit, Programme der Korrektur bei Menopause-Syndrom bei Männern und Frauen, Korrektur Kalzium-Stoffwechsel, zur Vorbeugung von Osteoporose in immunkorrigierenden Programmen.

# TRIOMED „UNIVERSAL“

## Effekte:

- Normalisierung der zentralen, peripheren und autonomen Nervensystems;
- Optimierungsfunktionen Hormondrüsen;
- verbesserte Erregungsleitung entlang der Nervenfasern;
- Aktivierung der Regeneration von Zellen des Nervensystems;
- immunmodulatorische Effekte;
- verjüngende Wirkung.

## Programm:

- 1Tag : Zone 89+ Zone 10re + Zone 43li;
- 2Tag : Zone 89 Zone 10li+ Zone 43re;
- 3. Tag: Zone35re+ Zone 99li;
- 4Tag : Zone 35li+ Zone 99re;
- 5Tag : Zone80re+ Zone 73li + Zone 19re;
- 6Tag : Zone80li+ Zone 73re + Zone 19li;
- 7Tag: Zone 29li+ Zone 8re+ Zone 13li;
- 8Tag : Zone 29re+ Zone 8li+ Zone 13re;
- 9Tag : Zone 35re+Zone 43 li;
- 10Tag : Zone 35li+ Zone 43 re.



# TRIOMED „UNIVERSAL“



**Strahler-„Freie Atmung„**

**Modus. 16**

**Dauer: 15min**

**Anwendung:**

für umfassende Präventionsprogramme , Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit Erkrankungen der Bronchien und der Lunge (Pneumonie, Bronchitis, chronischen Erkrankungen der Bronchien-Lungen-System, Asthma bronchiale und andere.).

**Effekte:**

- Verbesserung der Stoffwechselprozesse in Zellen und Geweben des bronchopulmonalen Systems;
- Aktivierung der Hauptfunktionen ;
- Die Normalisierung der Immunprozesse : Linderung von Autoimmun Aggression und immunmodulatorische Effekte;
- Reduzierung der Bronchospasmus;
- Erhöhung der Bindegewebeselastizität der Lunge bei Emphysem und Pneumosclerose;
- Die Normalisierung der Absonderung und die Entladung von Sputum.



# TRIOMED „UNIVERSAL“

„Mann muss  
**Neues** machen,  
um etwas **Neues**  
zu sehen“

-Georg Christoph Lichtenberg-

# Danke